

Free of
Parabens!

Prefert[®]

Vaginal Gel

Lubricant when trying to conceive

Vaginal Gleitmittel bei Kinderwunsch

Vaginaal glijmiddel bij kinderwens

Lubrifiant vaginal pour désir d'enfants

Lubrificante vaginal al intentar
la concepción

*Lubrificante vaginale ideale quando
si desidera il concepimento*

Lubrificante vaginal para os casos
em que se deseja ter filhos

Κολπικό λιπαντικό για ζευγάρια με
επιθυμία τεκνοποίησης

Vaginalt glidemiddel ved ønske
om graviditet

*Vaginalt glidmedel vid önskan att
bli gravid*

Vaginalt glidemiddel ved ønske om barn

Liukuvoide raskautta suunnitteleville

Dopochwowy żel nawilżający dla
par starających się o dziecko

Vytváří příznivé prostředí pro spermie

Vaginalni lubrikant ob želji po potroku

Vaginálny lubrikant pri želaní otehotnieť

Çocuk isteyen çiftler için vaginal

kayganlaştırıcı

مزلق مهبلي عند الرغبة في إنجاب أطفال




MEDintim


personal healthcare

Quick start to use Prefert®:


1.

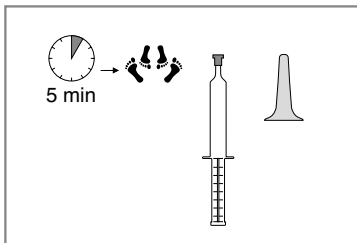


2.

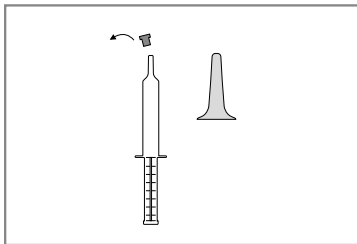

3.

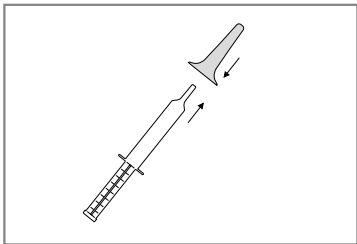

4.

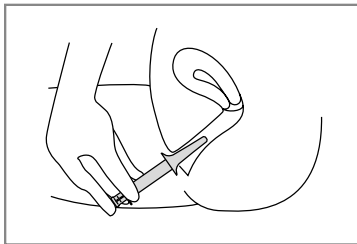


5.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

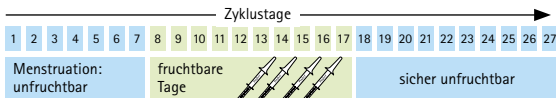

Prefert®

Vaginal Gel

Vaginal Gleitmittel bei Kinderwunsch

Wirkungsweise

Prefert® fördert die Spermienaktivität zum Zeitpunkt der Ovulation:

- gibt den Spermien eine optimale Umgebung
- idealer pH-Wert zur natürlichen Befruchtung
- verbessert die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu klassischen Gleitmitteln
- reduziert die osmotische Barriere für Spermien

- verbessert die Osmolarität
- klinisch getestet in Deutschland

Anwendungszeit

An den 3 fruchtbarsten Tagen des weiblichen Zyklus (Zeitpunkt der Ovulation).

Anwendung

Vor dem Geschlechtsverkehr einführen.

1. Nehmen Sie vor dem Sex eine Einmalspritze **Prefert®** Vaginal Gel und den wiederverwendbaren Applikator.
2. Entfernen Sie die graue Verschlusskappe von der Spritze.
3. Stecken Sie den Applikator auf die Spritze. Führen Sie den Vaginal Applikator in die Scheide ein.
4. Schieben Sie das **Prefert®** Vaginal

Gel durch Druck auf den Stempel der Spritze in die Scheide. Entfernen Sie wieder die Spritze mit dem Applikator.

5. Spülen Sie den Applikator aus und bewahren Sie ihn für die nächste Anwendung auf.
6. Jetzt können Sie Geschlechtsverkehr miteinander haben. Der Packungsinhalt ist für 4 Anwendungen.


Nach Gebrauch die leere Spritze im Hausmüll entsorgen.

Den Vaginal Applikator mit warmem Wasser reinigen und ausspülen. Wiederverwendbar.

Klinisch getestet in Deutschland.

English

Instructions for Use

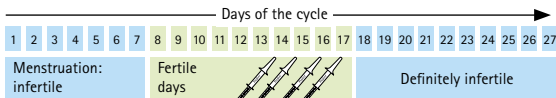

Prefert®

Vaginal Gel

Lubricant when trying to conceive

Mode of action

Prefert® promotes sperm activity at the time of ovulation:

- Provides an optimal environment for sperm
- Ideal pH for natural conception
- Improves mobility of sperm in comparison to classical lubricants
- Reduces the osmotic barrier for sperm
- Improves osmolarity
- Clinically tested in Germany

When to use

On the 3 most fertile days of the female cycle (time of ovulation).

Directions

Insert prior to intercourse.

1. Prior to intercourse, take out a disposable syringe of **Prefert®** Vaginal Gel and the reusable applicator.
2. Take the gray cap off the syringe.
3. Attach the applicator to the syringe. Insert the vaginal applicator into the vagina.
4. Apply pressure to the plunger of the syringe to push the **Prefert®** Vaginal Gel into the vagina. Remove the syringe with the applicator.
5. Rinse out the applicator and store it for the next application

6. Now intercourse can begin.

The contents of the package are for 4 applications.

Discard the empty syringe in household waste after use.

Clean and rinse the vaginal applicator with warm water. Can be reused.

Clinically tested in Germany.

Français

Mode d'emploi



Prefert®

Gel vaginal

Lubrifiant vaginal pour
désir d'enfants

Mode d'action

Prefert® favorise l'activité des spermatozoïdes au moment de l'ovulation :

- apporte aux spermatozoïdes un environnement optimal
- pH idéal pour la fécondation naturelle
- améliore la mobilité des spermatozoïdes en comparaison avec les lubrifiants classiques
- réduit la barrière osmotique pour les spermatozoïdes

- améliore l'osmolarité
- cliniquement testé en Allemagne

Moment de l'application

Aux 3 jours les plus féconds du cycle féminin (moment de l'ovulation).

Application

Introduire avant le rapport sexuel.

1. Avant le rapport sexuel, prendre une seringue à usage unique de **Prefert®** Vaginal Gel et l'applicateur réutilisable.
2. Enlever le capuchon gris de la seringue.
3. Placer l'applicateur sur la seringue. Introduire l'applicateur vaginal dans le vagin.
4. Pousser **Prefert®** Vaginal Gel dans le vagin en appuyant sur

le piston de la seringue. Enlever de nouveau la seringue avec l'applicateur.

5. Rincer l'applicateur et le conserver pour la prochaine application.
6. Vous êtes maintenant prête pour le rapport sexuel. Le contenu de l'emballage est prévu pour 4 applications.

Après utilisation, jeter la seringue vide avec les ordures ménagères.

Laver et rincer l'applicateur vaginal à l'eau chaude. Réutilisable.

Cliniquement testé en Allemagne.

Italiano

Istruzioni per l'uso



Prefert®

Gel vaginale

Lubrificante vaginale
ideale quando si desidera
il concepimento

Modo d'azione

Prefert® favorisce l'attività degli spermatozoi al momento dell'ovulazione:

- Crea un ambiente ottimale per gli spermatozoi
- Valore di pH ideale per il concepimento naturale
- Migliora la mobilità degli spermatozoi in confronto ai lubrificanti classici

- Riduce la barriera osmotica agli spermatozoi
- Migliora l'osmolarità
- Clinicamente testato in Germania

Quando usarlo

Nei 3 giorni più fertili del ciclo femminile (al momento dell'ovulazione).

Uso

Da applicare prima del rapporto sessuale.

1. Prima del rapporto sessuale, prendere una siringa monouso di **Prefert®** Gel vaginale e l'applicatore riutilizzabile.
2. Rimuovere il cappuccio grigio dalla siringa.
3. Inserire l'applicatore sulla siringa. Introdurre l'applicatore vaginale nella vagina.

4. Spingere **Prefert®** Gel vaginale nella vagina premendo sullo stantuffo della siringa. Estrarre la siringa con l'applicatore.

5. Risciacquare l'applicatore e metterlo da parte fino all'uso successivo.
6. Ora si può avere un rapporto sessuale. Il contenuto della confezione è sufficiente per 4 applicazioni.

Dopo l'uso, gettare la siringa vuota nei rifiuti domestici.

Pulire e risciacquare l'applicatore vaginale con acqua calda. Riutilizzabile.

Clinicamente testato in Germania.



Prefert®

Gel vaginal

Lubricante vaginal al intentar la concepción

Modo de actuación

Prefert® estimula la actividad del esperma en el momento de la ovulación:

- Proporciona el entorno óptimo para los espermatozoides
- Posee el valor pH ideal para la fecundación natural
- Mejora la movilidad de los espermatozoides en comparación con los lubricantes convencionales
- Reduce la barrera osmótica para los espermatozoides

- Mejora la osmolaridad
- Clínicamente probado en Alemania

Periodo de uso

Durante los 3 días más fértiles del ciclo femenino (el momento de la ovulación).

Aplicación

Aplicar antes de las relaciones sexuales.

1. Antes de las relaciones sexuales coja una jeringuilla de Gel Vaginal **Prefert®** desechable y el aplicador reutilizable.
2. Quite el tapón gris de la jeringuilla.
3. Monte el aplicador en la jeringuilla. Introduzca el aplicador vaginal en la vagina.

4. Empuje el émbolo de la jeringuilla para aplicar el Gel Vaginal **Prefert®** en la vagina. Retire la jeringuilla con el aplicador.
5. Lave el aplicador y guárdelo hasta el siguiente uso.
6. Ahora puede mantener las relaciones sexuales. El envase contiene producto para 4 aplicaciones.

Después del uso desechar la jeringuilla vacía junto con la basura doméstica.

Limpiar y enjuagar el aplicador vaginal con agua caliente. Reutilizable.

Clínicamente probado en Alemania.



Prefert®

Vaginale gel

Vaginaal glijmiddel bij kinderwens

Werking

Prefert® bevordert de spermactiviteit tot het moment van de ovulatie:

- geeft het sperma een optimale omgeving
- ideale pH-waarde voor natuurlijke bevruchting
- verbetert de beweeglijkheid van het sperma vergeleken met klassieke glijmiddelen
- vermindert de osmotische barrière voor het sperma

- verbetert de osmolaliteit
- klinisch getest in Duitsland

Gebruik

Op de 3 vruchtbareste dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie).

Gebruik

Inbrengen voorafgaand aan de geslachtsgemeenschap.

1. Neem voorafgaand aan de seks een spuit met **Prefert®** vaginale gel voor eenmalig gebruik en een herbruikbare applicator.
2. Verwijder het grijze afsluitkapje van de spuit.
3. Plaats de applicator op de spuit. Voer de vaginale applicator in in de schede.
4. Schuif de **Prefert®** vaginale gel

door via druk op de zuiger van de spuit in de schede. Verwijder de spuit met de applicator weer.

5. Spoel de applicator uit en bewaar deze voor de volgende toepassing.
6. Nu kunt u geslachtsgemeenschap met elkaar hebben. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 4 toepassingen.


Na gebruik de lege spuit met het huishoudelijk afval weggooiën.

De vaginale applicator met warm water reinigen en uitspoelen. Herbruikbaar.

Klinisch getest in Duitsland.

Dansk

Bruksanvisning

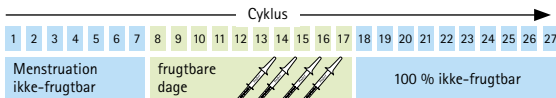

Prefert®

Vaginalgel

Vaginalt glidemiddel ved ønske om graviditet

Virkemåde

- Prefert® aktiverer sædcellerne på tidspunktet for ægløsningen
- Giver sædcellerne et optimalt miljø
 - Ideel pH-værdi til naturlig befrugtning
 - Forbedrer sædcellernes bevægelighed sammenlignet med de klassiske glidemidler
 - reducerer den osmotiske barriere for sædceller

- forbedrer osmolariteten
- klinisk testet i Tyskland

Tidspunkt for anvendelse

På de 3 mest frugtbare dage i den kvindelige cyklus (tidspunktet for ægløsning).

Anvendelse

Indføres inden samlejet.

1. Inden samlejet tages en engangssprøjte med Prefert® vaginalgel og applikatoren, der kan genanvendes.
2. Fjern den grå lukkehætte fra sprøjten.
3. Sæt applikatoren på sprøjten. Før vaginal-applikatoren ind i skeden.
4. Ved at trykke på sprøjstens stempel sprøjtes Prefert® vaginalgel ind i

skeden. Fjern igen sprøjten med applikatoren.

5. Skyl applikatoren og opbevar den indtil næste gang, den skal bruges.
6. Nu kan du have samleje. Pakkens indhold er beregnet til 4 anvendelser.

Efter brug bortskaffes den tomme sprøjte i husholdningsaffaldet.

Rengør og skyl vaginalapplikatoren med varmt vand. Kan genanvendes.

Klinisk testet i Tyskland.

Norsk

Bruksanvisning



Prefert®

Vaginal gel

Vaginalt glidemiddel ved ønske om barn

Virkemåde

- Prefert® fremmer spermaaktivitet til tidspunktet for eggøsning:
- Gir sperma optimale omgivelser
 - Ideell pH-verdi til naturlig befruktning
 - Forbedrer spermaets bevegelighet sammenlignet med klassiske glidemidler
 - Reduserer den osmotiske barrieren for sperma
 - Forbedrer osmolariteten
 - Klinisk testet i Tyskland

Brukstid

På de 3 fruktbare dagene i syklusen (tidspunkt for eggøsning).

Bruk

Bruk før samleie.

1. Bruk en engangssprøyte med Prefert® vaginal gel og den gjenbrukbare applikatoren før samleie.
2. Fjern den grå hetten fra sprøyten.
3. Stikk applikatoren på sprøyten. Før den vaginale applikatoren inn i skeden.
4. Skyv Prefert® vaginal gel gjennom. Trykk på stempelet på sprøyten i skeden. Fjern sprøyten med applikatoren igjen.
5. Skyll applikatoren, og ta vare på den til neste bruk.

6. Nå kan dere ha sex med hverandre. Pakningens innhold er til 4 gangers bruk.

Etter bruk kastes den tomme sprøyten i husholdningsavfallet.

Rengjør den vaginale applikatoren med varmt vann, og skyll godt. Kan brukes om igjen.

Klinisk testet i Tyskland.

Svenska

Bruksanvisning



Prefert®

Vaginalgel

Vaginalt glidmedel vid
önskan att bli gravid

Verkningsmekanism

Prefert® främjar spermieaktiviteten
vid tiden för ägglossningen:

- ger spermier en optimal miljö
- idealiskt pH-värde för naturlig befruktning
- förbättrar spermernas rörlighet jämfört med klassiska glidmedel
- minskar spermernas osmotiska barriär
- förbättra osmolariteten
- kliniskt testat i Tyskland

Användningstidpunkt

De 3 mest fertila dagarna i den kvinnliga menstruationscykeln (tiden för ägglossning).

Användning

Appliceras före samlaget.

1. Ta fram en engångsspruta
Prefert® vaginalgel och den återanvändbara applikatorn före samlaget
2. Ta av det grå locket på sprutan.
3. Sätt fast applikatorn på sprutan.
För in applikatorn i slidan.
4. Tryck på sprutkolven för att applicera Prefert® vaginalgel i slidan. Ta därefter ut sprutan med applikatorn.
5. Skölj applikatorn och förvara den tills den ska användas igen.

6. Nu kan du ha samlag.
Förpackningens innehåll räcker till 4 appliceringar.

Kasta den använda sprutan i
hushållsavfallet efter användning.

Rengör och skölj applikatorn med
varmt vatten. Kan återanvändas.

Kliniskt testat i Tyskland.

Suomi

Käyttöohje



Prefert®

Emätingeeli

Liukuvoide raskautta
suunnitteleville

Vaikutus

Prefert® tukee siittiöiden toimintaa
ovulaatioajan kohtana:

- luo siittiöille ihanteellisen ympäristön
- ihanteellinen pH-arvo luonnolliseen hedelmöittymiseen
- toisin kuin perinteiset liukuvoiteet, parantaa siittiöiden liikkuvuutta
- vähentää siittiöihin kohdistuvaa osmoottista estettä

- parantaa osmolariteettia
- kliinisesti Saksassa testattu

Käyttöaika

Kuukautiskierron kolmena
hedelmällisimpänä päivänä
(ovulaation aikana).

Käyttö

Tuotetta käytetään ennen
sukupuoliyhdyntää.

1. Ota pakkauksesta ennen seksin aloittamista yksi Prefert®-emätingeelin kertakäyttöruisku ja uudelleenkäytettävä asetin.
2. Poista ruiskun harmaa suojuks.
3. Yhdistä asetin ruiskuun. Vie asetin emättimeen.
4. Ruiskuta Prefert®-emätingeeli emättimeen painamalla ruiskun mäntää pohjaan asti. Tuo asetin ja ruisku ulos emättimestä.

5. Huuhtelee asetin ja pane se talteen seuraavaa käyttökertaa varten.
6. Yhdyntä voidaan nyt aloittaa.
Pakkauksen sisältö riittää neljään käyttökertaan.

Hävitä tyhjät ruiskut käytön jälkeen
kotitalousjätteen mukana.

Puhdista asetin huuhtelemalla
lämpimällä vedellä. Uudelleenkäytettävä.

Kliinisesti Saksassa testattu.

Slovenský

Návod na použitie



Prefert®

Vaginálny gél

Vaginálny lubrikant pri želaní otehotnieť

Spôsob účinku

Prefert® podporuje aktivitu spermií v čase ovulácie:

- zabezpečuje spermiám optimálne prostredie,
- ideálna hodnota pH pre prirodzené oplodnenie,
- v porovnaní s klasickými lubrikantmi zlepšuje pohyblivosť spermií,
- znižuje osmotickú bariéru pre spermie,
- zlepšuje osmolaritu,

- klinicky testované v Nemecku.

Čas použitia

Počas 3 najplodnejších dní ženského cyklu (čas ovulácie).

Použitie

Zaveďte pred pohlavným stykom.

1. Pred stykom vezmite jednorazovú striekačku vaginálneho gélu Prefert® a aplikátor na opakované použitie.
2. Odstráňte šedý uzáver zo striekačky.
3. Aplikátor nasadíte na striekačku. Vaginálny aplikátor zaveďte do pošvy.
4. Tlakom na piest striekačky zaveďte vaginálny gél Prefert® do pošvy. Striekačku aj s aplikátorom následne odstráňte.

5. Aplikátor vypláchnite a odložte si ho na ďalšie použitie.

6. Teraz môžete mať pohlavný styk. Obsah balenia slúži na 4 použitia.

Po použití zlikviduje prázdnu striekačku do komunálneho odpadu.

Vaginálny aplikátor vyčistíte teplou vodou a vypláchnite. Určený na opakované použitie.

Klinicky testované v Nemecku.

Slovenščina

Navodilo za uporabo



Prefert®

Vaginalni gel

Vaginalni lubrikant pri želji po zanositvi

Način učinkovanja

Gel Prefert® spodbuja aktivnost spermijev v času ovulacije:

- spermijem daje optimalno okolico
- idealna pH-vrednost za naravno oploditev
- izboljša gibljivost spermijev v primerjavi s klasičnimi lubrikanti
- zmanjša osmotsko pregrado za spermijske
- izboljša osmolarnost
- klinično testirano v Nemčiji

Čas uporabe

V 3 najbolj plodnih dneh ženskega cikla (čas ovulacije).

Uporaba

Vnesite pred spolnim odnosom.

1. Pred spolnim odnosom uporabite brizgo za enkratno uporabo Prefert® Vaginal Gel in aplikator za večkratno uporabo.
2. Z brizge odstranite siv pokrovček.
3. Na brizgo nataknete aplikator. Vaginalni aplikator vstavite v nožnico.
4. Pritisnite na žig na brizgi in tako potisnete gel Prefert® Vaginal Gel v nožnico. Brizgo odstranite iz aplikatorja.
5. Aplikator izperite in ga shranite za naslednjo uporabo.

6. Sedaj ste pripravljeni na spolni odnos. Vsebina pakiranja je za 4 uporabe.


Po uporabo zavrzite prazno brizgo med gospodinjske odpadke.

Vaginalni aplikator očistite in izperite s toplo vodo. Za večkratno uporabo.

Klinično testirano v Nemčiji.

čeština

Návod k použití

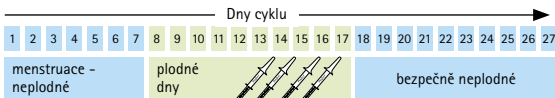

Prefert®

Vaginální gel

Vytváří příznivé prostředí pro spermie

Působení

Prefert® podporuje aktivitu spermií v době ovulace:

- poskytuje spermiím optimální prostředí
- ideální hodnota pH pro přirozené oplodnění
- zlepšuje pohyblivost spermií v porovnání s klasickými kluznými prostředky
- snižuje osmotickou bariéru pro spermie

- zlepšuje osmolaritu
- klinicky testováno v Německu

Doba použití

Ve 3 neplodnějších dnech ženského cyklu (doba ovulace).

Použití

Zaveďte před pohlavním stykem.

1. Před pohlavním stykem se vezměte jednorázovou stříkačku Prefert® vaginální gel a aplikátor k opakovanému použití.
2. Odstraňte ze stříkačky šedou krytku.
3. Nasuňte aplikátor na stříkačku. Zaveďte vaginální aplikátor do pochvy.
4. Vytlačte Prefert® vaginální gel tlakem na píst stříkačky do pochvy. Stříkačku z aplikátoru

opět vyjměte.

5. Aplikátor propláchněte a uložte si jej pro příští použití.
6. Nyní můžete mít pohlavní styk. Obsah balení je určen pro 4 použití.

Po použití odhodte prázdnou stříkačku do domovního odpadu.

Vaginální aplikátor vymyjte teplou vodou a vypláchněte. K opakovanému použití.

Klinicky testováno v Německu.

polski

Instrukcja użycia



Prefert®

Żel dopochwowy

Dopochwowy żel nawilżający dla par starających się o dziecko

Mechanizm działania

Prefert® wspomaga aktywność plemników w czasie owulacji:

- Zapewnia optymalne środowisko dla plemników
- Idealny odczyn pH do naturalnego poczęcia
- Poprawia ruchliwość plemników bardziej niż klasyczne żele nawilżające
- Zmniejsza barierę osmotyczną dla plemników

- Poprawia osmolarność
- Przebadany klinicznie w Niemczech

Kiedy stosować

W ciągu 3 najbardziej płodnych dni cyklu kobiety (w czasie owulacji).

Wskazówki

Żel należy wprowadzić przed współżyciem.

1. Przed współżyciem należy wyjąć jednorazową strzykawkę Żelu Dopochwowego Prefert® i aplikator wielorazowego użytku.
2. Zdjąć ze strzykawki szarą nasadkę.
3. Podłączyć aplikator do strzykawki. Wprowadzić aplikator dopochwowo do pochwy.
4. Naciśnąć na tłoczek strzykawki, aby wypchnąć Żel Dopochwowy

Prefert® do pochwy. Wyjąć strzykawkę z aplikatorem.

5. Wyplukać aplikator i przechować go do następnego użycia żelu.
6. Teraz można rozpocząć współżycie. Opakowanie zawiera 4 porcje żelu.

Po użyciu należy wyrzucić pustą strzykawkę do domowego pojemnika na śmieci.

Aplikator dopochwowy należy umyć i opłukać ciepłą wodą. Można go stosować ponownie.

Przebadany klinicznie w Niemczech.

Português

Instruções de utilização



Prefert®

Gel vaginal

Lubrificante vaginal para os casos em que se deseja ter filhos

Indicações terapêuticas

Prefert® estimula a atividade dos espermatozoides no período de ovulação:

- proporciona um ambiente ideal para os espermatozoides
- valor de pH ideal para a fecundação natural
- melhora a motilidade do esperma comparativamente com os lubrificantes clássicos

- reduz a barreira osmótica aos espermatozoides
- melhora a osmolaridade
- clinicamente testado na Alemanha

Tempo de aplicação

Nos 3 dias mais férteis do ciclo menstrual (período de ovulação).

Aplicação

Introduzir antes das relações sexuais.

1. Antes de ter relações sexuais, retire uma seringa descartável de **Prefert®** Gel Vaginal e o aplicador reutilizável da embalagem.
2. Remova a tampa de fecho cinzenta da seringa.
3. Insira o aplicador na seringa.

Introduza o aplicador vaginal na vagina.

4. Empurre o **Prefert®** Gel Vaginal para dentro da vagina mediante pressão no êmbolo da seringa. Remova a seringa com o aplicador.
5. Lave o aplicador e guarde-o para uma próxima aplicação.
6. Agora pode ter relações sexuais. O conteúdo da embalagem destina-se a 4 aplicações.

Após a utilização, eliminar a seringa vazia.

Lavar e enxaguar o aplicador vaginal com água quente. Reutilizável.

Clinicamente testado na Alemanha.

ελληνικά

Οδηγίες χρήσης



Prefert®

Κολπική γέλη

Κολπικό λιπαντικό για ζευγάρια με επιθυμία τεκνοποίησης

Τρόπος δράσης

Το **Prefert®** ενισχύει τη δραστηριότητα του σπέρματος κατά την περίοδο της ωορρηξίας:

- Παρέχει ένα βέλτιστο περιβάλλον για τα σπερματοζωάρια
- Ιδανική τιμή pH για τη φυσική γονιμοποίηση
- Βελτιώνει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων συγκριτικά με τα κλασικά λιπαντικά

- μειώνει τον ωσμωτικό φραγμό για τα σπερματοζωάρια
- βελτιώνει την ωσμωριακότητα
- κλινικά δοκιμασμένο στη Γερμανία

Περίοδος χρήσης

Τις 3 πιο γόνιμες ημέρες του κύκλου (κατά την ωορρηξία).

Χρήση

Εισάγεται πριν από τη συνουσία.

1. Πριν από τη σεξουαλική επαφή, πάρτε μία σύριγγα μίας χρήσης **Prefert®** Vaginal Gel και το επαναχρησιμοποιούμενο εξάρτημα χορήγησης (απλικατέρ)
2. Αφαιρέστε το γκριζό πώμα σφράγισης από την σύριγγα.
3. Τοποθετήστε το εξάρτημα εφαρμογής στη σύριγγα. Εισάγετε το κολπικό εξάρτημα εφαρμογής


στον κόλπο.

4. Ωθήστε το **Prefert®** Vaginal Gel μέσα στον κόλπο πιέζοντας το έμβολο της σύριγγας. Αφαιρέστε τη σύριγγα μαζί με το εξάρτημα εφαρμογής.
5. Πλύνετε το εξάρτημα εφαρμογής και φυλάξτε το για την επόμενη χρήση.
6. Μπορείτε τώρα να προχωρήσετε στη συνουσία. Το περιεχόμενο της συσκευασίας επαρκεί για 4 χρήσεις.

Μετά τη χρήση, απορρίψτε την κενή σύριγγα στα οικιακά απορρίμματα.

Το κολπικό εξάρτημα χορήγησης καθαρίζεται και ξεπλένεται με χλιαρό νερό. Επαναχρησιμοποιήσιμο.

Κλινικά δοκιμασμένο στη Γερμανία.

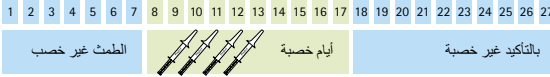

Prefert®

هلام مهبلي

مادة مزلفة مهبلية تستعمل عند الرغبة في إنجاب الأطفال

طريقة التأثير

يشجع بريفرت نشاط النطاف في وقت الإباضة:

يوفر بيئة مثالية للنطاف

رقم هيدروجيني مثالي للإخصاب الطبيعي

يحسن حركة النطاف بالمقارنة مع المواد

المزلفة التقليدية

يقال الحاجز التناسحي للحيوانات المنوية

4. ادفعي بريفرت,, الهلام المهبلي” الى

المهبل من خلال الضغط على مدقة الحقنة.

ثم ابعدي الحقنة مع المطباق.

5. اغسلي المطباق و أحفظيه للاستخدام التالي.

6. والان بإمكانكم ممارسة الجماع. محتوى

العبوة يكفي لـ 4 استعمالات.

يمكنك التخلص من الحقنة الفارغة بعد

الاستخدام مع النفايات المنزلية.

تنظيف وشطف المطباق المهبلي بالماء الساخن و استخدامه من جديد.

تم إختباره سريريأ في ألمانيا

- يحسن الأسمولية

- تم إختباره سريريأ في ألمانيا

وقت الاستعمال

في الأيام الثلاثة الأكثر خصوبة من الدورة الشهرية (موعد الإباضة).

الاستعمال

يتم إدخاله الى المهبل قبل عملية الجماع.

1. قبل عملية الجماع خذي حقنة بريفرت

,, الهلام المهبلي” استعمال مرة واحدة

والمطابق ذوالاستخدامات المتكررة.

2. أزيل الغطاء الرمادي عن الحقنة.

3. أوخزي المطباق على الحقنة. ادخلي

المطباق المهبلي في المهبل.

Türkçe

Kullanım talimatı

Prefert®

Vajinal jel

Çocuk isteyen çiftler için vajinal kayganlaştırıcı

Etki şekli

Prefert® ovülasyon sırasında sperm aktivitesini artırır:

- Sperm için optimal bir ortam sağlar
- Doğal konsepsiyon için ideal pH
- Klasik kayganlaştırıcılara nazaran sperm hareketliliğini artırır
- Sperm için osmotik bariyeri zayıflatır
- Osmolariteyi artırır
- Almanya'da klinik olarak test edilmiştir

Adet döngüsü



Kullanma zamanı

Kadının adet döngüsünde en fertil olduğu 3 gün (ovülasyon zamanı).

Uygulama

İlişkiden önce uygulayın.

1. İlişkiden önce tek kullanımlık bir Prefert® Vajinal Jel şırıngasını ve tekrar kullanılabilen aplikatörü çıkartın.
2. Şırınganın gri renkli başlığını çıkarın.
3. Aplikatörü şırıngaya takın. Vajinal aplikatörü, vajinaya yerleştirin.
4. Prefert® Vajinal Jeli vajinaya sıkamak için şırınganın pistonuna bastırın. Aplikatörle birlikte şırıngayı çıkartın.
5. Aplikatörü durulayın ve sonraki uygulama için saklayın.

6. Artık ilişki başlayabilir. Ambalajın içeriği 4 uygulama içindir.

Kullandıktan sonra boş şırıngayı çöpe atın.

Vajinal aplikatörü ılık su ile temizleyin ve durulayın. Tekrar kullanılabilir.

Almanya'da klinik olarak test edilmiştir.

Ingredients:

Purified Water, Sodium Chloride,
Sodium Phosphate, Potassium
Phosphate, Arabinogalactan,
Hydroxyethylcellulose, Polyhexanide.

Paraben-free!

pH-value: 7.0 – 7.4



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland

Made in Germany



Medical device



4 013273 001717

Art.Nr.: Gel Prefert

www.prefert.com

